

# TバードVS/LEGACY 呼吸回路セット [ディスポ]



加湿器の種類: F&P社 850型

ホースヒーター: シングルタイプ

## ◆10個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)10個 730-850	
商品コードNo.	052 01 305	リファレンスNo. RT205
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	
<b>ご注意</b>		
<b>別途必要となるパーツ</b>	<b>商品コードNo.</b>	<b>個数</b>
カップリングフィルタ [CV-B-2・3]	022 01 003	1
IMIテストバッグ R5(15mm)	035 09 042	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度/フロープローブ ディスポ回路用 MR850	052 01 234	1
ヒータワイヤ アダプタ シングル (RTシリーズ用) 850	052 01 282	1
蛇管 22/22-15 (スムーズポア)	105 21 001	1
呼吸弁ボディ(VS・VSO <sub>2</sub> ) [Tバード]	105 22 110	1
呼吸弁ダイアフラム 1個 Tバード・VELA	105 22 121	1

## ◆1個入(MR290付)

名称	成人ディスポ回路シングルMR290付(RT205)1個 730-850	
商品コードNo.	052 01 315	リファレンスNo. RT205(1/10)
最小販売個数	1	
注	左記10個タイプに同じです	

(注1)いずれか1点を選んでください



チャンバ  
40個 MR210  
052 01 151



ホースアダプタ

\*チャンバ(MR210)を使用時にはこのアダプタを使います。



エアフィルタ(ファン)  
5枚入 Tバード  
105 42 128



エルボコネクタ [ディスポ]

注:再使用型であるエルボコネクタ22mmオス/22mmメス(P/MD4709) [105 21 042]を使用するときには、このアダプタは使いません



ホースクリップ  
(蛇管にセットされています)


ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm (ダール)25個  
035 20 050

ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm (ダール)25個  
035 20 060



IMIテストバッグ  
R5(15mm)  
035 09 042


### ネブライザ使用時

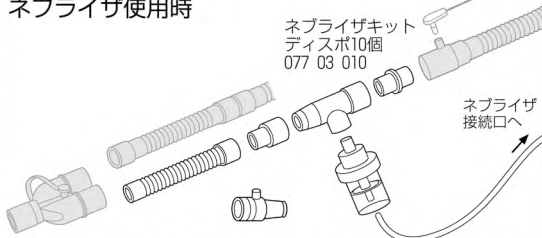

ネブライザキット  
ディスポ10個  
077 03 010

ネブライザ  
接続口へ

注:ネブライザキットの中に温度プローブ用のコネクタが含まれていますが、この仕様では使いません

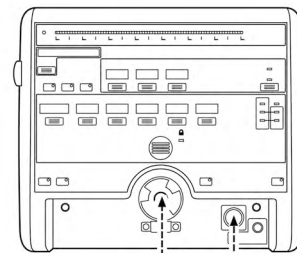

呼吸弁ダイアフラム  
1個 Tバード・VELA  
105 22 121

15cm

蛇管 22/22-15  
(スムーズポア)  
058 01 001

呼吸弁ボディ  
(VS・VSO<sub>2</sub>)  
[Tバード]  
105 22 110

カップリング  
フィルタ  
[CV-B-2・3]  
022 01 003

ヒータワイヤ  
アダプタシングル  
(RTシリーズ用)850  
052 01 282

温度/フロープローブ  
ディスポ回路 MR850  
052 01 234

加湿器本体  
F&P850  
052 01 800

チャンバ  
10個 MR290  
052 01 167